

COMMENT METTRE A JOUR VOTRE LECTEUR VITAL'ACT XIRING EN VERSION 2.06 ?



Information

Cette nouvelle version permet aux Infirmier(e)s de facturer les vaccins antigrippaux en actes isolés.
Elle inclut aussi les tarifs infirmiers en date du 19 Avril 2009.

1 Pré requis :

- Utiliser le logiciel Vega5 (logiciel agréé SESAM-Vitale 1.40).
- Avoir téléchargé toutes les feuilles de soins et empreintes de cartes Vitale pour tous les professionnels de santé utilisant le Vital'Act.
- **Pour les lecteurs Vital'Act achetés avant août 2005 et encore en version 1.31, vous devez disposer d'une carte logicielle 1.40.**
- Connaître le port de communication (port COM) où est connecté le lecteur Vital'Act.
(Voir Annexe 1)
- Connaître l'entête FSE du lecteur Vital'Act.
(Voir Annexe 2)



Information

- Le lecteur Baladeur Santé VITAL'ACT Xiring est nommé dans ce document : **VITAL'ACT**
- Correspondance des touches du clavier du VITAL'ACT :
 - ◊ Touche verte **VAL** = Valider
 - ◊ Touche jaune **COR** = Corriger
 - ◊ Touche rouge **ANN** = Annuler
 - ◊ Flèches haut / bas = Sélectionner
 - ◊ Touche **ⓘ** = Marche/Arrêt (au dessus de **ANN**)


2 Préparatifs :

Allumez votre ordinateur.
Fermez Vega5.
Connectez le VITAL'ACT à votre ordinateur.
Le VITAL'ACT affiche **ATTENTE ORDRE**.


ATTENTION : Laissez connecté le VITAL'ACT durant toute la procédure.

3 Mise à jour logicielle du lecteur SESAM-Vitale :

Cliquez sur le lien suivant "http://telecharge3.vega5.fr/hotline/maj_vitalact_2.06_1_40.exe" puis cliquez sur "Exécuter" (ou sur "Ouvrir" en fonction de votre navigateur internet). Les fenêtres suivantes apparaissent :

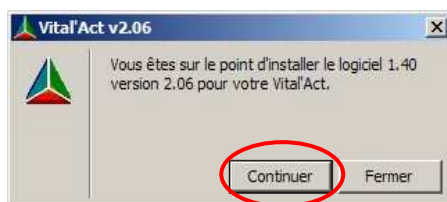

Cliquez sur "Continuer",

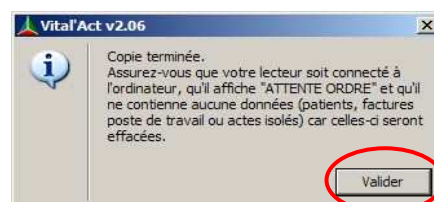

puis sur "Valider"

La fenêtre suivante apparaît

1) Sélectionnez l'application à charger :
CDC 1.40 – Version 2.06 du VITAL'ACT

2) Sélectionnez ici le port de communication sur lequel votre lecteur est connecté
(Voir Annexe 1)

3) Cliquez sur le bouton "**Lancer le chargement.**"

... Patientez jusqu'à l'affichage du message : "**La mise à jour de votre Vital'Act est réussie !**"



Information Le VITAL'ACT affiche **INSEREZ CARTE DE DEVERROUILLAGE** :

- ◆ Insérez cette carte de licence logicielle comme une carte Vitale.



- ◆ ... Patientez, puis retirez la carte lorsque le VITAL'ACT affiche "**LOGICIEL DEVERROUILLE.**"

IMPORTANT : si le VITAL'ACT affiche "**INSEREZ CARTE DE DEVERROUILLAGE**", et que vous n'avez pas la carte de licence logicielle, téléphonez à l'Assistance Technique (04.67.91.25.20).

4 Paramétrez le lecteur SESAM-Vitale :

- Le VITAL'ACT affiche :
- "**NUMERO DE SERIE**" : saisissez le numéro de série du lecteur, puis **VAL**.
(numéro à 5 chiffres inscrit sur l'étiquette arrière du lecteur, SERIAL Nr : ...)
 - "**CONFIRMEZ SAISIE**" : saisissez le numéro de série du lecteur, puis **VAL**.
 - "**DATE**" : saisissez la date au format : " jj mm aaaa ", puis **VAL**.
 - "**HEURE**" : saisissez l'heure au format : "hh mm", puis **VAL**.

Déconnectez le VITAL'ACT . Il s'éteint.

Allumez le VITAL'ACT en mode déconnecté en appuyant sur la Touche ①

Le VITAL'ACT affiche :

- "ENTETE FSE NON CONFIGUREE" : appuyez sur **VAL**.
- "ENTETE FSE" : renseignez une nouvelle entête FSE au format " xxx ", puis **VAL**.



IMPORTANT : il est indispensable de renseigner une entête FSE inconnue à ce jour par Vega5. Vous pouvez par exemple incrémenter votre entête FSE d'une dizaine (voir Annexe 2).
Exemple : ancienne entête FSE 001 >> nouvelle entête FSE 011.

- "INTRODUIRE CARTE CPS" (s'affiche si nécessaire) : insérez votre Carte de Professionnel de Santé.
- "SAISIE DU CODE 3 ESSAIS" : saisissez le code porteur à 4 chiffres de la CPS.
- "LECTURE CARTE PS" :
Sélectionnez votre numéro de Professionnel de Santé à 9 chiffres, puis **VAL**.
- "ENREGISTRER CODE PORTEUR ?" : sélectionnez **O**, puis **VAL**.
- "LECTEUR NON IDENTIFIE" : appuyez sur **VAL**.

Le VITAL'ACT s'éteint tout seul.

Connectez le VITAL'ACT à votre ordinateur, il affiche "ATTENTE ORDRE".

Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**,

Cliquez sur "Identifier", validez les différents messages de confirmation.

Déconnectez le VITAL'ACT. Il s'éteint.

Allumez le VITAL'ACT en mode déconnecté en appuyant sur la touche ①.

Le VITAL'ACT affiche "**CHANGER DE SITUATION**" : appuyez sur **VAL**.

Le VITAL'ACT affiche "**INTRODUIRE CARTE VITALE**".

L'initialisation est terminée. Votre VITAL'ACT est prêt à l'emploi en version 2.06.

Annexe 1

Connaître le port de communication où est connecté votre Vital'Act :

Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**.

Cliquez sur "**Paramétrer le lecteur**", notez la valeur du port de communication, puis validez.



Annexe 2

Connaître l'entête FSE du lecteur Vital'Act :

Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**,

Cliquez sur **Identifier**, validez les éventuels messages de confirmation.

Notez la valeur n° FSE.

Rang	CDC	Logiciel n° de série	typen° FSE	nb ps
2	SV131 00	113	27516	3
			001	4



Information

Si plusieurs n°FSE sont présents dans cette colonne, notez celui dont la valeur est la plus élevée.