

# Comment mettre à jour votre lecteur VITAL'ACT XIRING en version 2.07 ?



## Information :

Cette nouvelle version permet aux Infirmier(e)s le paramétrage de l'acte AMI pour le vaccin de la grippe en actes isolés.

## 1 Pré requis :

- Utiliser le logiciel Vega5 (logiciel agréé SESAM-Vitale 1.40).
- Avoir téléchargé toutes les feuilles de soins et empreintes de cartes Vitale pour tous les professionnels de santé utilisant le Vital'Act.
- **Pour les lecteurs Vital'Act achetés avant août 2005 et encore en version 1.31, vous devez disposer d'une carte logicielle 1.40, dans ce cas le lecteur affichera INSEREZ CARTE DE DEVERROUILLAGE, et ce uniquement dans ce cas.**
- Connaître le port de communication (port COM) où est connecté le lecteur Vital'Act. (Voir Annexe 1)
- Connaître l'en-tête FSE du lecteur Vital'Act. (Voir Annexe 2)

## Glossaire :

- Le lecteur Baladeur Santé VITAL'ACT Xiring est nommé dans ce document : **VITAL'ACT**
- Correspondance des touches du clavier du VITAL'ACT :
  - ◊ Touche verte **VAL** = Valider
  - ◊ Touche jaune **COR** = Corriger
  - ◊ Touche rouge **ANN** = Annuler
  - ◊ Flèches haut / bas = Sélectionner
  - ◊ Touche **ⓘ** = Marche/Arrêt (au dessus de **ANN**)

## 2 Préparatifs :

Allumez votre ordinateur.  
 Fermez Vega5.  
 Connectez le VITAL'ACT à votre ordinateur.  
 Le VITAL'ACT affiche **ATTENTE ORDRE**.




**Astuce** Avant de commencer les manipulations lisez jusqu'au bout cette procédure ou encore mieux, imprimez la !

**ATTENTION** : Laissez connecté le VITAL'ACT durant toute la procédure.


## 3 Mise à jour logicielle du lecteur SESAM-Vitale :

- 1) cliquez sur le lien suivant : [http://telecharge3.vega5.fr/hotline/MaJ\\_VITALACT\\_2.07\\_1.40.exe](http://telecharge3.vega5.fr/hotline/MaJ_VITALACT_2.07_1.40.exe)
- 2) cliquez sur "**Exécuter**" (ou sur "**Ouvrir**" en fonction de votre navigateur internet).
- 3) l'application s'ouvre, cliquez sur le bouton "**Lancer le chargement**"

Les fenêtres suivantes apparaissent :

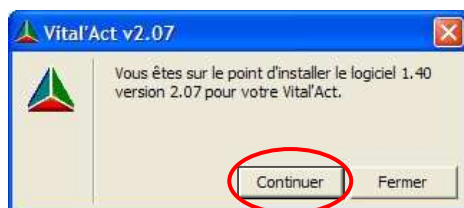

Cliquez sur "Continuer".

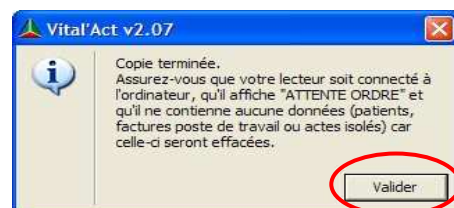

Cliquez sur "Valider".

D'autres questions sur Vega5 ? Consultez notre F.A.Q. [www.epsilog.com/faq](http://www.epsilog.com/faq)

La fenêtre suivante apparaît



1) Sélectionnez ici le port de communication sur lequel votre lecteur est connecté (Voir Annexe 1)

2) Cliquez sur le bouton "Lancer le chargement."

... Patientez jusqu'à l'affichage du message : "La mise à jour de votre Vital'Act est réussie !"

**Votre lecteur est prêt à être paramétré.**

**Optionnel : Si le VITAL'ACT affiche INSEREZ CARTE DE DEVERROUILLAGE :**

- ◆ Insérez cette carte de licence logicielle comme une carte Vitale.



- ◆ ... Patientez, puis retirez la carte lorsque le VITAL'ACT affiche "LOGICIEL DEVERROUILLE."

**IMPORTANT :** si le VITAL'ACT affiche "INSEREZ CARTE DE DEVERROUILLAGE", et que vous n'avez pas la carte de licence logicielle, téléphonez à l'Assistance Technique (04.67.91.25.20).

#### 4 Paramétrez le lecteur SESAM-Vitale :



##### Information :

Nous avons deux possibilités pour le paramétrage après la mise à jour :

- 1) le lecteur ne demande que la date et l'heure et est fonctionnel.
- 2) le lecteur demande le « NUMERO DE SERIE » et il faut effectuer les manipulations indiquées ci-dessous.

- Le VITAL'ACT affiche :
- a) "NUMERO DE SERIE" : saisissez le numéro de série du lecteur, puis **VAL**.  
(Numéro inscrit sur l'étiquette arrière du lecteur, SERIAL Nr, S/N: ...)
  - b) "CONFIRMEZ SAISIE" : saisissez le numéro de série du lecteur, puis **VAL**.
  - c) "DATE" : saisissez la date au format : " jj mm aaaa ", puis **VAL**.
  - d) "HEURE" : saisissez l'heure au format : "hh mm", puis **VAL**.

Déconnectez le VITAL'ACT. Il s'éteint.

Allumez le VITAL'ACT en mode déconnecté en appuyant sur la Touche ①

- Le VITAL'ACT affiche

- 1) "ENTETE FSE NON CONFIGURE" : appuyez sur **VAL**.
- 2) "ENTETE FSE" : renseignez un nouvel en-tête FSE au format "xxx", puis **VAL**.



**IMPORTANT** : il est indispensable de renseigner un en-tête FSE inconnu à ce jour par Vega5. Vous pouvez par exemple incrémenter votre en-tête FSE d'une dizaine (voir Annexe 2).  
Exemple : ancien en-tête FSE 001 >> nouvel en-tête FSE 011.

- 3) "INTRODUIRE CARTE CPS" (s'affiche si nécessaire) : insérez votre Carte de Professionnel de Santé.
- 4) "SAISIE DU CODE 3 ESSAIS" : saisissez le code porteur à 4 chiffres de la CPS.
- 5) "LECTURE CARTE PS" :  
Sélectionnez votre numéro de Professionnel de Santé à 9 chiffres, puis **VAL**.
- 6) "ENREGISTRER CODE PORTEUR ?" : sélectionnez **O**, puis **VAL**.
- 7) "LECTEUR NON IDENTIFIE" : appuyez sur **VAL**.

- Le VITAL'ACT s'éteint tout seul.

- a) Connectez le VITAL'ACT à votre ordinateur, il affiche "ATTENTE ORDRE".
- b) Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**,
- c) Cliquez sur "Identifier", validez les différents messages de confirmation.
- d) Déconnectez le VITAL'ACT. Il s'éteint.
- e) Allumez le VITAL'ACT en mode déconnecté en appuyant sur la touche ①.
- f) Le VITAL'ACT affiche "CHANGER DE SITUATION" : appuyez sur **VAL**.
- g) Le VITAL'ACT affiche "INTRODUIRE CARTE VITALE".

L'initialisation est terminée. Votre VITAL'ACT est prêt à l'emploi en version 2.07.

## Annexe 1

### Connaître le port de communication où est connecté votre Vital'Act :

Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**.

Cliquez sur "**Paramétrer le lecteur**", notez la valeur du port de communication, puis validez.



## Annexe 2

### Connaître l'entête FSE du lecteur Vital'Act :

Ouvrez Vega5 / **Monde Périphériques / Onglet Parc lecteurs**,

Cliquez sur **Identifier**, validez les éventuels messages de confirmation.

Notez la valeur n° FSE.

Rang	CDC	Logiciel n° de série	typen° FSE	nb ps
2	SV131 00	113	27516	3
			001	4



### Important :

Si plusieurs n°FSE sont présents dans cette colonne, notez celui dont la valeur est la plus élevée.

D'autres questions sur Vega5 ? Consultez notre F.A.Q. [www.epsilog.com/faq](http://www.epsilog.com/faq)



EPSILOG  
CS 7007  
CASTRIES  
34748 VENDARGUES cedex

Département Clientèle : [client@epsilog.com](mailto:client@epsilog.com)  
Département Technique : [hotline@epsilog.com](mailto:hotline@epsilog.com)  
SAV lecteurs : [lecteur@epsilog.com](mailto:lecteur@epsilog.com)

tél : 04 67 91 25 23 fax : 04 67 91 25 26  
tél : 04 67 91 25 20 fax : 04 67 91 25 21  
tél : 04 67 91 25 20 fax : 04 67 91 25 21